

广东科西智能科技有限公司

消费者服务热线:400-930-8863

消费者投诉信箱:keheal_tousu@163.com

地址:广东省佛山市顺德区容桂街道卫红社区容桂大道北120号2号厂房
三层之二十三



多功能导液按摩梳使用说明书

使用前请仔细阅读本说明书并妥善保管

感谢您使用科西产品

科西生活服务号



(扫码关注了解更多品牌资讯)

科西生活服务官



(扫码添加 领取延保)

致用户的一封信

首先感谢您购买和使用科西产品。为了您更好地使用本产品,请在使用产品前仔细阅读说明书。为了您和家人的安全及利益,请务必遵守说明书中的操作指引及注意事项。

请妥善保存本说明书、保修卡及购买证明。

如果在使用过程中有任何问题,请及时与我们联系。再次感谢您选择我们的产品,希望它能够使您的生活更加便捷、舒适、温馨。


—— 爱bala的西西



目录

一、包装清单	1	六、清洁保养	7
二、基本参数	2	七、常见问题和解决办法	7
三、产品介绍	2	八、电气原理图	8
四、操作说明	3	九、环保清单	9
五、注意事项	5	十、保修服务	10

包装清单

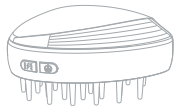

主机



导液仓



电源线



清洁刷



滴管



说明书

因产品批次不同,部分配件可能会出现调整情况,以实际收到的货品为准。

基本参数

产品名称: 多功能导液按摩梳

产品型号: GS-MC1


充电输入: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

电池容量: 500mAh

额定功率: 2.5W


执行标准: GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008

产品介绍

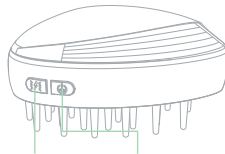

震动按键

开/关机按键
红蓝光切换

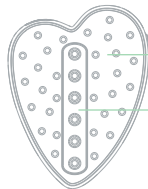

光疗区域

导液仓

操作说明

按键/指示灯说明

长按开/关机键开机, 开机后机器进入工作状态。开机状态下, 长按关机。

红蓝光切换功能

开机状态下, 单击开/关机键, 切换红光和蓝光功能。


震动功能

开机状态下, 单击震动按键开启震动按摩功能。单击切换按摩1档、2档、3档(舒缓曲线波)、关闭。机器长按关机时, 震动功能也会关闭。

机器在开机状态下, 无操作10分钟, 会自动关机。

注意:切勿在连接电源线时使用产品, 避免发生危险。

导液仓使用说明

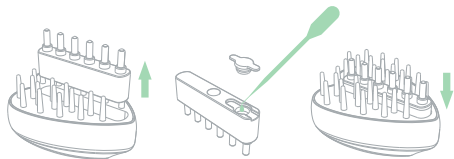

导液仓与机身为磁吸结构, 一只手握住机身, 另一只手拿取导液仓, 即可分离机身与导液仓。

- 导液仓可直接使用清水清洗。机身不可水洗, 可使用清洁刷或软布进行清洁。
- 注入液体前, 需将导液仓的防漏塞拔出, 使用吸管注入合适的液体。
- 每次注入液体1-5mL, 切勿加满储液箱, 以免液体外漏。
- 导液仓放入机身前, 需检查防漏塞是否完全闭合, 以免药液流入机身内部。

注意事项

请在使用前仔细阅读使用说明书,并妥善保管以备日后参考。

- 1.本产品不可由身体、感官或智力残障人士以及无相关经验与知识之人士(包括儿童)使用,除非有监护人的看管或指导,以确保其能够安全使用本产品。
- 2.禁止儿童操作产品或者当作玩具使用。当在儿童附近使用产品时,需要密切关注。禁止儿童在无监护人的情况下清理或者维护产品。
- 3.本产品仅限外用。
- 4.头皮状态处于受伤、湿疹、肿胀、化脓性疾病及过度日晒等异常状况时,请勿使用本产品。
- 5.请勿在导液梳上直接涂抹染发剂。请勿作为洗发梳等工具使用。
- 6.请妥善放置本产品,避免摔落或撞击。当本产品发生故障时请联系制造商,请勿自行拆解。
- 7.请勿使用酒精、挥发油或去光水擦拭本产品表面。
- 8.充电时请将TYPE-C接口完全插入主机充电口,充电状态下请勿使用机器,充电结束后切断电源,如有充电异常请停止使用。

9.请勿在水源、潮湿、高温、火源、易燃易爆物质附近使用本产品,请将产品存放于干燥处,放置于浴室或潮湿处有可能会损坏本产品。

10.如需清理导液仓,请取下后冲洗,并确保干爽后再次安装。

11.避免直射眼睛、眼球使用该产品。

12.本产品可拆卸替换原装的导液仓,除此之外的其他部件请勿拆卸或自行修理,请勿使用其他生产商生产的任何部件或配件,否则保修政策失效。

13.使用结束后,务必关闭产品电源。外出时,请避免误触开关按键。

14.请避免任何液体进入到电源输入口中。

15.建议在5°C-35°C环境下充电,请勿将产品长时间曝晒于阳光下,紫外线可能导致产品老化。

16.请不要给宠物使用本产品,并将本产品储存在宠物接触不到的地方。

17.有心脏病或病史者、急性病患者、皮肤病患者、恶性肿瘤患者、出血倾向等血液病者、骨质疏松、软组织疾病者、中风等身体异常者请勿使用。

18.请勿在精密操作或驾驶时使用本产品。按摩部位实施过手术,或有皮肤损伤、红肿炎症、淤血等不适症状时,请勿使用。

19.请勿长时间连续在同一部位使用本产品,防止因过度按摩造成皮肤破损、肌肉疼痛。


清洁保养

1. 请勿使用酒精、挥发油或去光水擦拭本产品表面，否则可能会损伤本产品。
2. 本产品机身只能用干燥柔软的布进行擦拭清理，严禁水洗。
3. 导液仓可用水进行冲洗，清洗后请及时擦干或吹干。
4. 如长时间不使用，请将导液仓内的液体清空，并对导液仓进行清洁，干燥后可放入机身内进行储存。

常见问题和解决办法

问题现象	可能原因	解决办法
产品不工作	电池电量不足	充电后再使用
	机器长时间没有开机工作	

电气原理图

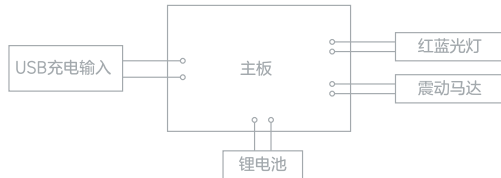

环保清单

零件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
外壳	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规则编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



本标识内数字表示产品在正常状态下的环保使用年限为10年

保修服务

与您的购买相关的保修期具体如下:

有效时间

一年

保修期适用范围:

- 1、本产品自购买日起一年内在正常使用状况下出现质量问题提供免费维修服务。
- 2、若超过上项所定期限后需更换零配件,则酌情收取检修费。
- 3、在保修期间,若有下类情形恕不免费修理:
 - a.未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据);
 - b.超过保修范围的维修;
 - c.因拆装或改造而造成的破坏;
 - d.因错误使用或人为造成的损坏;
 - e.非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣的场所)所造成的故障或损害;
 - f.因正常使用而自然污旧者。

姓名		电话	
邮箱		购买时间	
地址			